



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ ブラツ  
「ニーパロ+ (プラス)」

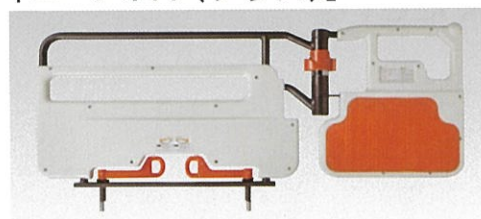

■サイズ/  
全長117cm×  
全高54.4cm

品番	TAISコード
PG02-116ATP	00631-000532
ご利用者負担額	200単位/月
レンタル料金	2,000円/月


パッド付レバーロック式ベッド用グリップ ブラツ  
「ニーパロL (エル)」

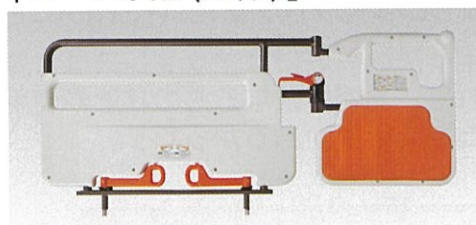

■サイズ/  
全長117cm×  
全高54.4cm

品番	TAISコード
PG03-116MP	00631-000536
ご利用者負担額	200単位/月
レンタル料金	2,000円/月

ロングタイプ対応スペーサー付  
パッド付自動ロック式ベッド用グリップ  
「ニーパロ+ (プラス)」

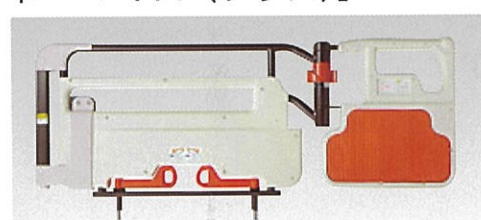


■サイズ/  
全長124cm×  
全高54.4cm

スペーサーは必ずボード側に取り付けて下さい

品番	TAISコード
PG02-116ATPL	00631-000530
ご利用者負担額	200単位/月
レンタル料金	2,000円/月

ロングタイプ対応スペーサー付  
パッド付レバーロック式ベッド用グリップ  
「ニーパロL (エル)」

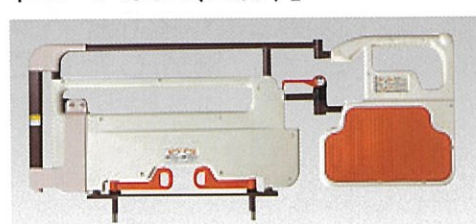

■サイズ/  
全長124cm×  
全高54.4cm

スペーサーは必ずボード側に取り付けて下さい

品番	TAISコード
PG03-116MPL	00631-000534
ご利用者負担額	
レンタル料金	

ガス圧式昇降ベッドテーブル ブラツ



■サイズ/  
全長84.0cm×全幅47.0×  
全高60.0~84.0cm  
(天板)全長84.0cm×奥行40.0  
●ストッパー付きキャスター

品番	TAISコード
PZT-840	00631-000178
ご利用者負担額	
レンタル料金	

# 特殊寝台付属品（マットレス）●選び方

お使いになる方の状態や目的に合わせてお選びください。

在宅ケアベッドにはマットレスは付属していません。  
それは、お使いになる方の状態や使用目的に合ったマットレスをお選び  
いただく必要があるからです。

## マットレスの選び方

**Question 1** ベッド上とベッドまわりでどのような生活をして  
いますか？

(就寝時に使う／就寝と日中の休息に使用／大半をベッドで過ごす)

**Question 2** マットレスを選ぶにあたって、  
優先したいことは、何ですか？

(立ち上がり／端座位／床ずれ予防)

マットレスを選びます。

(迷ったときは、福祉用具専門相談員にご相談ください。)

## マットレスを選ぶ際のポイント

### ●動作のしやすさ

動作をしやすいのは、人のからだの  
のやわらかさに近いマットレスや、  
やや硬めのマットレスです。

### ●マットレスの製品特性

立ち上がりのしやすさや端座位を  
取ったときの安定性、体圧分散性  
等も考慮する必要があります。  
また、お手入れの面から、重さや  
拭き取りやすさがポイントとなり  
ます。

### ●寝具の好み

普段から使い慣れている寝具に近  
いものが馴染みやすいのですが、  
柔らかすぎるマットレスを選ぶと、  
からだを動かしにくいといったこ  
とも起こります。

### ●ベッドとの適合

ベッドの寸法や機能に合わせて、  
必ず適合するマットレスを選びま  
しょう。




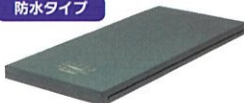







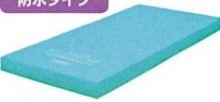
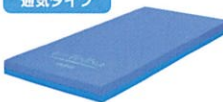






マットレス一覧表

かたさ調節機能付

かため

やわらかめ

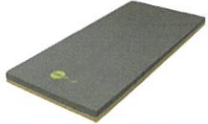品名		幅	厚
	ライフ (防水タイプ) (レギュラー)	91cm 83cm	10cm
	ライフ (防水タイプ) (ミニ)	91cm 83cm	10cm
	ライフ (通気タイプ) (レギュラー)	91cm 83cm	10cm
	ライフ (通気タイプ) (ミニ)	91cm 83cm	10cm
	ドリームエア-550	91cm 83cm	5.3cm
	プレグラーマットレス (レギュラー)	91cm 83cm	8cm
	プレグラーマットレス (ミニ)	91cm 83cm	8cm
 <b>防水タイプ</b>	ソフィア ハード面 (レギュラー) ソフィア ハード面 (ミニ)	91cm 83cm	10cm
 <b>通気タイプ</b>		91cm 83cm	10cm
 <b>ドライタイプ</b>	エバーフィット C3 ハード面 (レギュラー) エバーフィット C3 ハード面 (ミニ)	91cm 83cm	10cm
 <b>通気タイプ</b>		91cm 83cm	10cm
 <b>防水タイプ</b>	ソフィア ソフト面 (レギュラー) ソフィア ソフト面 (ミニ)	91cm 83cm	10cm
 <b>通気タイプ</b>		91cm 83cm	10cm
 <b>防水タイプ</b>	テルサ しっかり面 (レギュラー) テルサ しっかり面 (ミニ)	91cm 83cm	12cm
 <b>通気タイプ</b>		91cm 83cm	12cm
	UB ポイントマットレス 標準面 (レギュラー)	90cm 83cm	8cm
	UB ポイントマットレス 標準面 (ミニ)	90cm 83cm	8cm
 <b>防水タイプ</b>	テルサ やわらか面 (レギュラー) テルサ やわらか面 (ミニ)	91cm 83cm	12cm
 <b>通気タイプ</b>		91cm 83cm	12cm
 <b>ドライタイプ</b>	エバーフィット C3 ソフト面 (レギュラー) エバーフィット C3 ソフト面 (ミニ)	91cm 83cm	10cm
 <b>通気タイプ</b>		91cm 83cm	10cm
	アルファプラ すくっと (通気タイプ) (レギュラー)	91cm 83cm	9cm
	アルファプラ すくっと (通気タイプ) (ミニ)	91cm 83cm	9cm
	UB ポイントマットレス ソフト面 (レギュラー)	90cm 83cm	8cm
	UB ポイントマットレス ソフト面 (ミニ)	90cm 83cm	8cm




# 特殊寝台付属品 (マットレス)

特殊寝台付属品

## エバーフィット C3 (ドライ・通気)

パラマウントベッド

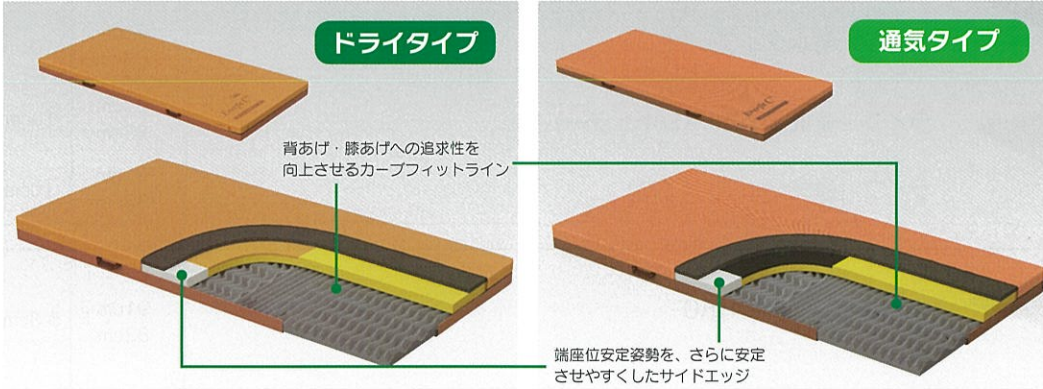

ふつう + やわらかめ

3つの「CHANGE」で快適性と利便性を向上させたリバーシブルマットレス

### 体圧分散性を向上

ソフト面上層に現行品よりも、やわらかい素材を使用することで、体圧分散性能を向上

### 動きやすさを向上

中心にポリエステル代わりに反発性の高いウレタンフォームを採用することで動きやすさを向上

### 安定性を向上

現行品よりもサイドエッジの幅を広げ(5 → 10cm)より硬い素材を使用することで端座位や立ち上がりの安定性を向上

新機能!

「さらフェース」(ドライタイプのみ)

新素材「さらフェース」が水分の浸入を防ぎながら、身体とマットレスの間に発生する水蒸気をカバー表面で吸収します。吸収した水蒸気は、身体が接触していない部分から放出するので、蒸れが軽減され、床ずれ防止と快適な睡眠をサポートします。

ドライタイプ

■レギュラー/191cm ■厚さ/10cm

品番	幅	TAISコード
KE-611UQ	91cm	00170-001033
KE-613UQ	83cm	00170-001035

通気タイプ

■レギュラー/191cm ■厚さ/10cm

品番	幅	TAISコード
KE-611TQ	91cm	00170-001042
KE-613TQ	83cm	00170-001044

ドライタイプ

■ミニ/180cm ■厚さ/10cm

品番	幅	TAISコード
KE-612UQ	91cm	00170-001034
KE-614UQ	83cm	00170-001036

通気タイプ

■ミニ/180cm ■厚さ/10cm


品番	幅	TAISコード
KE-612TQ	91cm	00170-001043
KE-614TQ	83cm	00170-001045

ご利用者負担額 300単位/月

レンタル料金 3,000円/月

## プレグラーマットレス

パラマウントベッド

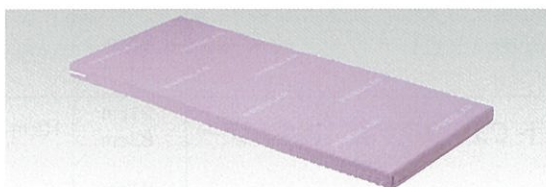

やや  
かため

●素材/ポリエステル繊維

■レギュラー/191cm ■厚さ/8cm ■ミニ/180cm ■厚さ/8cm


品番	幅	TAISコード	品番	幅	TAISコード
KE-551Q	91cm	00170-000159	KE-5511Q	91cm	00170-000286
KE-553Q	83cm	00170-000142	KE-5531Q	83cm	00170-000285

ご利用者負担額 200単位/月

レンタル料金 2,000円/月

## ナーシングスターマットレス

西川リビング

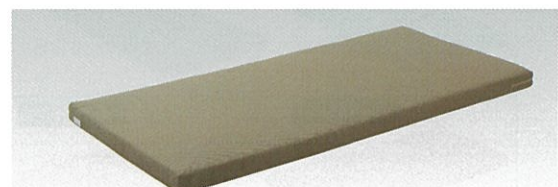

やや  
やわらかめ

●素材/固綿 100%

■レギュラー/191cm ■厚さ/8.5cm

品番	幅	TAISコード
302862016	91cm	00109-000104
302862008	83cm	


ご利用者負担額 150単位/月

レンタル料金 1,500円/月

テルサ


●さまざまなニーズに対応し満足度を向上する“質感が選べる”標準マットレス

モルテン

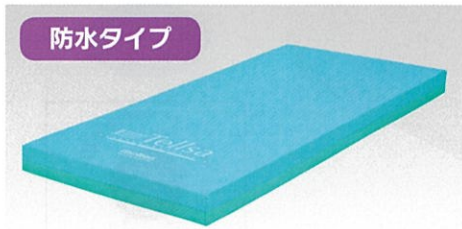

防水タイプ

やわらか  
しっかり

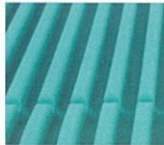

やわらか面  
スリット形状



しっかり面  
フラット形状

●全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます。〈リバーシブル〉

●素材／ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

■レギュラー／191cm ■厚さ／12cm


品番	幅	TAISコード
MTLS1291	91cm	00054-000204
MTLS1283	83cm	00054-000203

■ミニ／180cm ■厚さ／12cm

品番	幅	TAISコード
MTLS1291S	91cm	00054-000207
MTLS1283S	83cm	00054-000206

ご利用者負担額 300単位/月

レンタル料金 3,000円/月

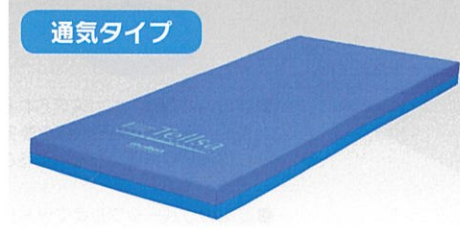

通気タイプ

やわらか  
しっかり

●マットレス内部は3つのインナーマットから構成されており、【やわらか面】と【しっかり面】を部分的に組み合わせ、異なる質感を選ぶことができます。〈部分交換〉

●素材／ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

■レギュラー／191cm ■厚さ／12cm

品番	幅	TAISコード
MTLSV1291	91cm	00054-000209
MTLSV1283	83cm	00054-000208

■ミニ／180cm ■厚さ／12cm

品番	幅	TAISコード
MTLSV1291S	91cm	00054-000212
MTLSV1283S	83cm	00054-000211


ご利用者負担額

レンタル料金



ドリームエア550 ●マット厚約5cmを実現、超低床ベッドにおすすめです

オーシン

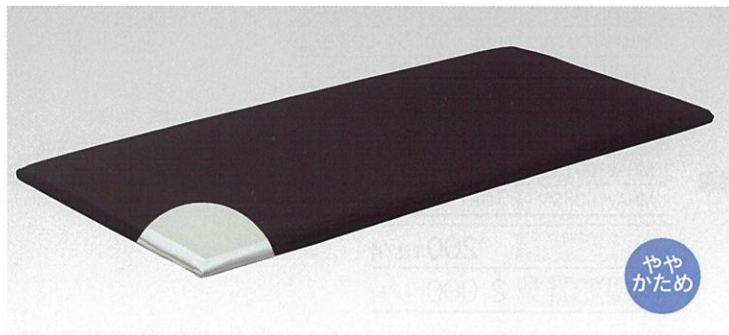

やや  
かため

●超低床ベッドにおすすめ

約5cm厚を実現。より効果的に超低床ベッドをご利用頂けます。

●高耐熱・耐久性 耐熱温度は約210℃

●底付きしない超薄型マットレス



約31万本(91×191cm)の縦糸で薄型でも底付きしにくい構造

●通気性抜群でムレにくい

空気の通りが非常に良く、ムレや汗を低減

●寝返りが楽な高反発

寝返りが楽な高反発マットレスなのでベッド上で自力で除圧動作が行える方に特におすすめです。

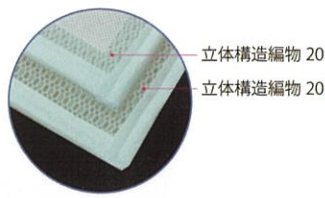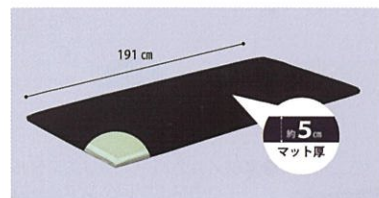

立体構造編物 20  
立体構造編物 20

品番	幅	TAISコード
OS-130	91cm	01535-000033
	83cm	

●素材／ポリエステル100%

■全長／191cm


■厚さ／5.3cm

ご利用者負担額 200単位/月

レンタル料金 2,000円/月

アルファプラ すくっと (通気タイプ)

タイカ

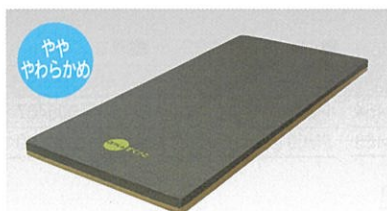

やや  
やわらかめ

介護保険の特殊寝台付属品の枠内で利用できる「動作を補助し」「立ち上がりを補助し」「体圧分散効果が高く」「心地よい眠り」ができるバランスの取れたマットレスです。

■レギュラー／191cm ■厚さ／9cm ■ミニ／180cm ■厚さ／9cm

品番	幅	TAISコード	品番	幅	TAISコード
TS-SKT-A1R	91cm	00563-000021	TS-SKT-A1S	91cm	00563-000022
TS-SKT-A3R	83cm	00563-000019	TS-SKT-A3S	83cm	00563-000020

ご利用者負担額 200単位/月

レンタル料金 2,000円/月

●素材／(カバー)ポリエステル繊維(中身)シリコーンゲル/ポリウレタンフォーム



# 特殊寝台付属品 (マットレス)


特殊寝台付属品

## ライフ

●さまざまな状態の利用者様へ自立支援と親しみのある寝心地を提供します。

モルテン

### 防水タイプ

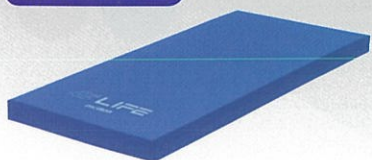

■レギュラー／191cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MLF91DBL	91cm	00054-000161
MLF83DBL	83cm	

■ミニ／180cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MLF91SDBL	91cm	00054-000161
MLF83SDBL	83cm	


ご利用者負担額 300単位/月

レンタル料金 3,000円/月

### かたさ調整機能

- 無段階で「かたさ」が変えられるため、利用者それぞれのご要望に応じた寝具環境を提供することができます。
- 従来のリバーシブル式マットレスのようにやわらかい面とかたい面どちらかを選ぶのではなく、身体状況に合わせて1台で何通りもの「かたさ」に調整できます。
- 素材/上層部: ポリエステル繊維  
中間層: ナイロンタフタ  
下層部: ウレタンフォーム

### 通気タイプ

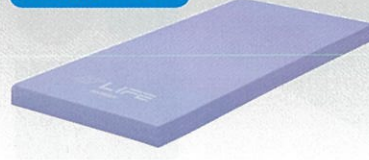

■レギュラー／191cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MLFV91LBL	91cm	00054-000160
MLFV83LBL	83cm	


■ミニ／180cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MLFV91SLBL	91cm	00054-000160
MLFV83SLBL	83cm	

ご利用者負担額 300単位/月

レンタル料金 3,000円/月

### かたさ調整機能

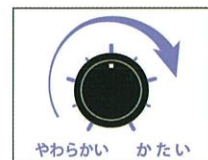

やわらかい かたい  
足元側のダイヤルで簡単に調整できます


- 素材/上層部: ポリエステル繊維  
中間層: ナイロンタフタ  
下層部: ウレタンフォーム

## ソフィア

●長時間維持する体圧分散性能と2つの寝心地を選べるリバーシブル構造マットレス

モルテン

### 防水タイプ

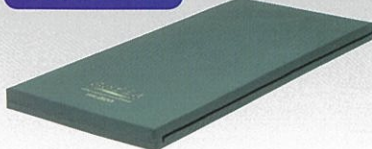

■レギュラー／191cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MHA1091A	91cm	00054-000308
MHA1083A	83cm	00054-000306

■ミニ／180cm ■厚さ／10cm


品番	幅	TAISコード
MHA1091SA	91cm	00054-000309
MHA1083SA	83cm	00054-000307

ご利用者負担額 200単位/月

レンタル料金 2,000円/月

### やややわらかめ かため

- 好みのかたさで使い分けできるリバーシブル(両面)仕様。
- 汚れた時は清拭できる防水性のカバー。
- 素材/カバー表面: ウレタン合皮  
カバー裏面: ポリエステル  
マット: ウレタンフォーム  
インナーカバー: ポリエステル

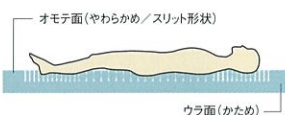

### 通気タイプ



■レギュラー／191cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MHAV1091A	91cm	00054-000313
MHAV1083A	83cm	00054-000311

■ミニ／180cm ■厚さ／10cm


品番	幅	TAISコード
MHAV1091SA	91cm	00054-000314
MHAV1083SA	83cm	00054-000312

ご利用者負担額 200単位/月

レンタル料金 2,000円/月

### やややわらかめ かため

- 好みのかたさで使い分けできるリバーシブル(両面)仕様。
- 汗や水分を素早く吸収拡散する通気カバー。
- 素材/カバー: ポリエステル  
マット: ウレタンフォーム  
インナーカバー: ポリエステル

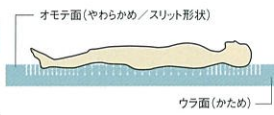

## ユービーポイントマットレス

●硬さが選べるリバーシブルタイプ

ブラッツ

### 防水タイプ



■レギュラー／191cm ■厚さ／8cm

品番	幅	TAISコード
PD503-A9008	90cm	00631-000247
PD503-A8308	83cm	00631-000254

ご利用者負担額 100単位/月

レンタル料金 1,000円/月

### やわらかめ

- 素材/外カバー: ポリエステル  
ポリウレタンラミネート  
中材: ウレタンフォーム
- 重量/レギュラー-90cm幅 6.1kg  
レギュラー-83cm幅 5.7kg  
ショート90cm幅 5.9kg  
ショート83cm幅 5.4kg

■ショート／182cm ■厚さ／8cm

品番	幅	TAISコード
PD503-A9008S	90cm	00631-000253
PD503-A8308S	83cm	00631-000255

### 通気タイプ



■レギュラー／191cm ■厚さ／8cm

品番	幅	TAISコード
PM09-A9008	90cm	00631-000464
PM09-A8308	83cm	00631-000468

ご利用者負担額 100単位/月

レンタル料金 1,000円/月

### やわらかめ

- 素材/外カバー: ポリエステル  
中材: ウレタンフォーム
- 重量/レギュラー-90cm幅 6.1kg  
レギュラー-83cm幅 5.7kg  
ショート90cm幅 5.9kg  
ショート83cm幅 5.4kg

■ショート／182cm ■厚さ／8cm

品番	幅	TAISコード
PM09-A9008S	90cm	00631-000467
PM09-A8308S	83cm	00631-000469

# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

# 床ずれ防止用具 ●選び方

寝返りや体位変換を自由に行えないなど、床ずれを予防したい方に必要になるのが、体にかかる圧力を効果的に分散する床ずれ防止用具です。床ずれ予防またはケアにお選びください。

## 床ずれの予防方法

### ■体位変換と床ずれ防止用具の使用。

仰向け、右向き、左向きと2時間毎に体位を変える。もしくは、体の状態に適した床ずれ防止用具を使用しましょう。



### ■栄養管理に気をつけましょう。食事を食べやすく工夫したり、栄養バランスも考えましょう。特に、タンパク質やビタミンCを十分に摂取しましょう。



### ■常に清潔に保ち、刺激を避けましょう。


入浴や清拭で、皮膚を清潔に保ちましょう。寝間着や寝床も清潔にして、よく乾いたシワのないものを使いましょう。オムツもこまめに交換することでムレを防げます。



## 床ずれ防止用具の効果

特定部位へ集中する体の圧力を分散します。


### ■一般用マットレス使用の仰臥位

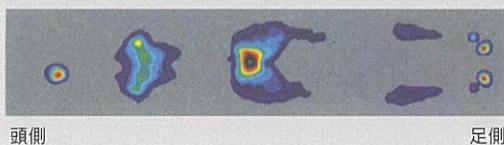

頭側

足側

### ■床ずれ防止用具使用の仰臥位

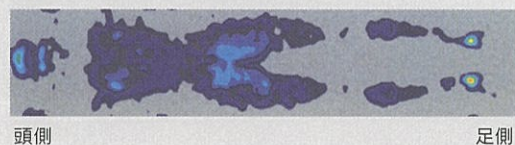

頭側

足側

接触圧

低

高

## 床ずれ防止用具の種類

- 身体的機能が低下し自力で体位変換できない寝たきりの方



体圧分散性能が高い「エアマットレス」を優先的に選びましょう。

- ベッド上で自力で体位変換できる方



安定感や安楽性を重視する「ウレタンフォーム」を選びましょう。