

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

床ずれ防止用具 ●選び方

寝返りや体位変換を自由に行えないなど、床ずれを予防したい方に必要になるのが、体にかかる圧力を効果的に分散する床ずれ防止用具です。床ずれ予防またはケアにお選びください。

床ずれの予防方法

■体位変換と床ずれ防止用具の使用。

仰向け、右向き、左向きと2時間毎に体位を変える。もしくは、体の状態に適した床ずれ防止用具を使用しましょう。



■栄養管理に気をつけましょう。

食事を食べやすく工夫したり、栄養バランスも考えましょう。特に、タンパク質やビタミンCを十分に摂取しましょう。



■常に清潔に保ち、刺激を避けましょう。


入浴や清拭で、皮膚を清潔に保ちましょう。寝間着や寝床も清潔にして、よく乾いたシワのないものを使いましょう。オムツもこまめに交換することでムレを防げます。





床ずれ防止用具の効果

特定部位へ集中する体の圧力を分散します。

■一般用マットレス使用の仰臥位

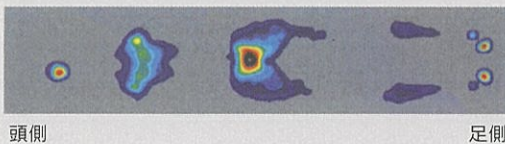

■床ずれ防止用具使用の仰臥位

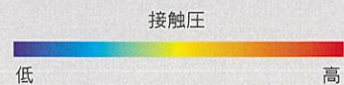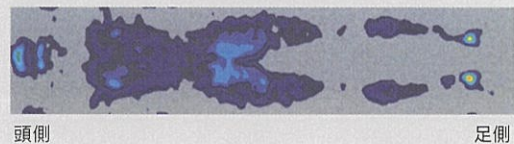

床ずれ防止用具の種類

●身体的機能が低下し自力で体位変換できない寝たきりの方

▼

体圧分散性能が高い「エアマットレス」を優先的に選びましょう。

●ベッド上で自力で体位変換できる方


▼

安定感や安楽性を重視する「ウレタンフォーム」を選びましょう。




圧力切替型エアマットレス


個別のリスクに応じて機能を使い分けましょう。

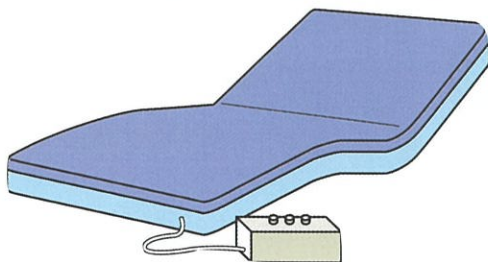

1. 骨突出部位の定期的解放

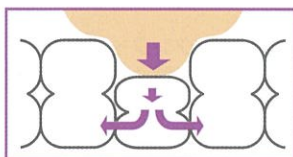

- 2. ご利用者ごとの個別の圧力管理の実現
- 3. 筋肉の圧迫解放による静脈環流の確保

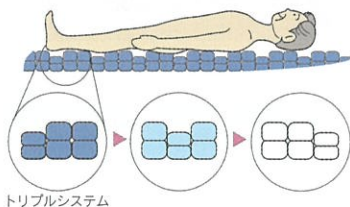

トリプルシステム

■エアマットレスの特徴

1. 骨突出部位の定期的解放

エアマットレスは身体（体重）を支える局所である骨突出部位をエアセルの膨張収縮により局所にかかる圧力の集中を継続させません。この点が、低圧ながら、常時一定の圧が加わり続けるウレタンフォームと大きく異なる機能の違いです。

2. ご利用者ごとの個別の圧力管理の実現


マイコンセンサー搭載のエアマットレスは、ご利用者に合わせた個別の圧力管理ができます。

3. 筋肉の圧迫解放による静脈環流の確保

エアセルが膨らんだり縮んだりを繰り返して、第二の心臓である筋肉を圧迫解放して静脈の環流を促します。

静止型ウレタンフォームマットレス

予防的に使いましょう。

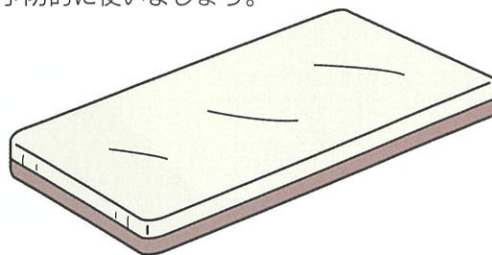

1. 安定感の実現



エアマットレスのフワフワ感（浮遊感）を嫌い、ウレタンフォームを選択するケースがあります。個別の圧力管理はできないため、リスクの高いご利用者への対応には、限界があり、床ずれの予防対策が中心となります。

■ウレタンフォームマットレスの特徴

1. 体表面に沿って広い面で体重保持

ウレタンフォームは発泡素材であるウレタンフォームを体重で押し潰し、容積を変化させて体表面に追従させて広い受圧面積で身体を支えることにより、体圧を分散するものです。

2. ある程度限定されたご利用者に対応

ウレタンフォームは素材の組合せ、厚みなど予め設定されたご利用者に限定して使用され、個別のご利用者に対応した圧力調整は不可能です。

3. 必要となる熱対策、ムレ対策

肌が密着し、ウレタンフォームに沈みこむので、ムレたり熱がこもるといった現象が発生します。

床ずれ防止用具

アマンダ

モルテン

床ずれ防止用具



除圧性能を大幅に向上させ、利用者様の体を優しく傾ける「3D 除圧」と万が一の時に素早く通知する「お知らせ機能」を搭載した高機能エアマットレス

素材/マット：ウレタンフィルム
 フィッティング層・底着き防止層：高耐久ウレタンフォーム
 カバー：ウレタン合皮

1 究極の床ずれ対策を実現した『3D 除圧』

次元 1：たて除圧

次元 2：よこ除圧

次元 3：傾き除圧



2 ベッドまわりの安全・安心を追求した『お知らせ機能』

マットレスにセンサーを内蔵し、夜間の利用者様の起き上がりやベッドからのずり落ち（転落の可能性）を検知すると、専用のワイヤレス受信機を通じてお知らせします。



マットレスが検知



専用のワイヤレス受信機にお知らせ



夜間でもすぐ対応することができます

■レギュラー/193cm ■厚さ/14cm				■ショート/182cm ■厚さ/14cm				ご利用者負担額
品番	幅	重量	TAISコード	品番	幅	重量	TAISコード	
MAMA91	91cm	11kg	00054-000436	MAMA91S	91cm	10.5kg	00054-000438	レンタル料金
MAMA83	83cm	10kg	00054-000435	MAMA83S	83cm	9.5kg	00054-000437	

利楽

電源コードを差し込むだけで、床ずれ防止機能がスタート。
操作不要の全自動エアマットレス。



i-fitting（硬さ自動運転機能）

体重・体型・背角度を自動運転で調整します。

● 簡単操作

タッチ式ボタンを採用した操作パネル

※ カスタマイズの必要がなければ操作は不要です。

● 安全・安心

停電時もエアを保持

電気の供給が途絶えると、自動でエアの漏出を防ぎ、約2週間はマットレス内のエアを保持。




● 快適な寝心地を

エアマットレス特有の凸凹感を和らげる
トップクッション&背上げ時のずれ力を
軽減するグライドシート。
エアマットレスに新登場！ニット生地の
通気カバー。



端座位をとったり体位変換を
行う際は操作パネルの操作で
ワンタッチ切替。

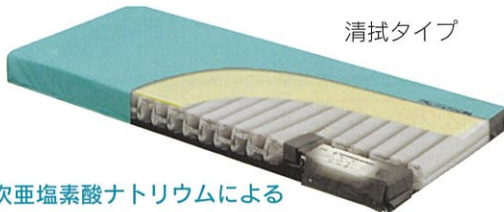

清拭タイプ

次亜塩素酸ナトリウムによる
清拭消毒に対応する耐薬品性防水カバー。



通気タイプ

取り外して洗浄できる
通気/通水カバー。

【通気タイプ】

■レギュラー/191cm ■厚さ/13cm

品番	幅	TAISコード
KE-971T	91cm	00170-001069
KE-973T	83cm	00170-001071

■ミニ/180cm ■厚さ/13cm

品番	幅	TAISコード
KE-972T	91cm	00170-001070
KE-974T	83cm	00170-001072

ご利用者負担額

レンタル料金

【清拭タイプ】

■レギュラー/191cm ■厚さ/13cm

品番	幅	TAISコード
KE-971S	91cm	00170-001065
KE-973S	83cm	00170-001067

■ミニ/180cm ■厚さ/13cm


品番	幅	TAISコード
KE-972S	91cm	00170-001066
KE-974S	83cm	00170-001068

ご利用者負担額

レンタル料金

リンクケーブルE

対象となるベッドと接続してさらに便利に使えます。

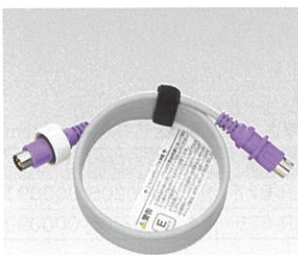

●パワーリンク ベッドからの電源供給でエアマットレスのコード不要に。

●背ぬき

背上げや背下げの動作後に、背中がマットレスに貼り付いて皮膚が引っ張られる状態を解消するため、短時間でエアセルの空気を出し入れして、上部部をマットレスから浮かせます。

●E-ストレッチ

背上げ動作後、マットレスが下方方向に向かないように、エアを急速注入。身体の「ずれ」と「圧迫感」を軽減します。

品番	TAISコード
KE-97CQ	00170-001073

ご利用者負担額

レンタル料金



床ずれ防止用具

ビッグセルインフィニティ/ビッグセルインフィニティプラス 床ずれ発生リスク度/重度

ケープ

●ベッドの背上げと連動するマット内圧自動調整機能がついた高性能エアマットレス。安心な停電対策機能付き。

床ずれ防止用具



自動ヘッドアップ対応機能



- ベッドの背上げ角度に連動し最適なマット内圧に自動調整
- 圧迫感の少ない背上げ姿勢底づきを防止

個別ケア対応モード

- 拘縮対応モード**
拘縮の方の寝姿勢保持と体圧分散を行います。
- 微波動モード**
術後の安静保持が必要な方に、体圧分散と寝心地を両立させます。
- クイックハードモード**
ベッド上のケアを行う際に、安定床面を確保します。

停電対策機能

- 停電時マット全体の内圧を約14日間保持
- 電気復旧後は元の設定値が自動復帰するメモリ機能付き

ecoモード

- 最大約20%節電

安全

■レギュラー/191cm
■厚さ/17cm

品番	幅	TAISコード
CR-555	90cm	00206-000074
CR-550	84cm	

ご利用者負担額 700単位/月

レンタル料金 7,000円/月

■ショート/180cm
■厚さ/17cm

品番	幅	TAISコード
CR-557	90cm	00206-000074
CR-553	84cm	

■レギュラー/191cm
■厚さ/17cm (足元のみ厚さ18cm)

品番	幅	TAISコード
CR-565	90cm	00206-000076
CR-561	84cm	

ご利用者負担額 900単位/月

レンタル料金 9,000円/月

ネクサス R / ネクサス R プラス 床ずれ発生リスク度/軽度～重度

ケープ

●ワンタッチで使用できる「かんたんモード」を搭載。

幅広い療養者や状態の変化に対応できる高性能マルチタイプエアマットレス。



プロモーションビデオをご覧いただけます。



スリム設計

- マットの厚み12cm。ポンプも奥行き8.7cmのスリム設計。



クイックハードモード

- 約3分でエアマットレス全体をかたくします。安定床面が必要なシーンに迅速に対応します。

停電対策機能付

自動ヘッドアップ対応機能付

■レギュラー/191cm
■厚さ/12cm

品番	幅	TAISコード
CR-663	90cm	00206-000083
CR-660	84cm	00206-000082

ご利用者負担額 600単位/月

レンタル料金 6,000円/月

■ショート/180cm
■厚さ/12cm

品番	幅	TAISコード
CR-667	90cm	00206-000085
CR-665	84cm	00206-000084

<プラス仕様>

■レギュラー/191cm
■厚さ/12cm (足元のみ厚さ13cm)

品番	幅	TAISコード
CR-673	90cm	00206-000089
CR-671	84cm	00206-000088

ご利用者負担額


レンタル料金

■ショート/180cm
■厚さ/12cm (足元のみ厚さ13cm)

品番	幅	TAISコード
CR-677	90cm	00206-000091
CR-675	84cm	00206-000090

オスカー ハイブリッドタイプ

モルテン

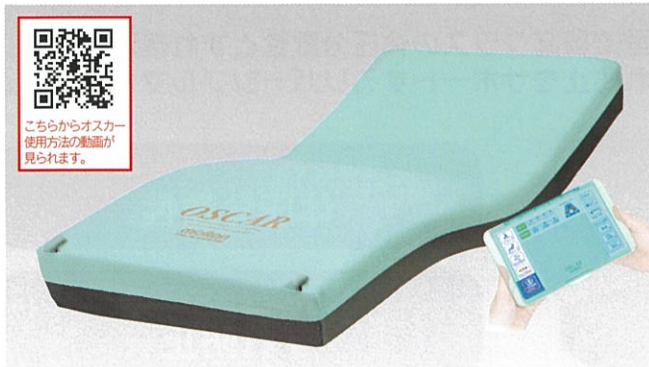

こちらからオスカー
使用方法の動画が
見られます。


様々な身体状況の利用者様へのケアに最適な特性に対応する、人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる特性を備えています。

体圧分散性能	除圧性能	すれ力対策	寝心地	座位安定性	むれ対策	ひえ対策	体位変換
体圧分散式マットレスの基本特性				QOL 特性			+α

①国内最高レベルの体圧分散性能

体と接触するマイクロエアセルは表面をフラット（平ら）にすることで体圧分散性能を向上しています。

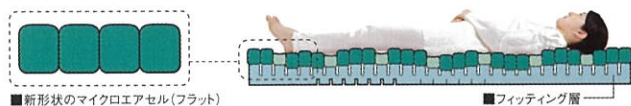

■新形状のマイクロエアセル(フラット)

■フィッティング層

床ずれ発生リスク度/軽度～重度

②優れた除圧性能

「安定重視」と「除圧重視」の2種類の圧切替モードにより、優れた除圧性能を発揮します。



③優れたすれ力対策性能

「背上げモード」「リハビリモード」にすると背抜き・圧抜き動作を行い、背中にかかる苦しさを緩和します。

④寝心地の向上

マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。

⑤生活動作のための安定性と安全性

マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、マットレスの安定性と安全性を高めています。



⑥寝床内のむれ対策

寝床内の湿った空気を対策します。

⑦寝床内のひえ対策

エアセルが冷たい外気で冷やされないように常温を維持します。

⑧優しい体位変換

やさしく体を傾ける自動体位変換を行います。利用者様の安眠を妨げず介護者の負担も軽減します。



■レギュラー/193cm ■厚さ/17cm

品番	幅	TAISコード
MOSC91	91cm	00054-000137
MOSC83	83cm	

■ショート/182cm ■厚さ/17cm

品番	幅	TAISコード
MOSC91S	91cm	00054-000137
MOSC83S	83cm	

ご利用者負担額 1,000単位/月

レンタル料金 10,000円/月

グランデ


モルテン



- マットレス上部のマイクロエアセルにより、体圧分散性能を向上しています。
- マイクロエアセルとフィッティング層、2つの層で交互に圧切替を行うダブル圧切替方式により、優れた除圧性能を発揮し、特に局所（骨突出部、仙骨部、かかとなど）の圧迫力対策に適しています。
- ポンプ操作パネルに利用者様の7つの項目を入力すると、自動で身体状況にあった条件（マットレスのかたさ、動作、厚さ、除湿レベル）が設定されます。
- 介護状況に応じて一時的な設定（リハビリモード、背上げモード、強力除湿モード、ボタンロック）も可能です。

床ずれ発生リスク度/軽度～重度

身体状況に合わせて最適な使用状態を自動で設定する床ずれ対策と安全対策に優れた高機能エアマットレス

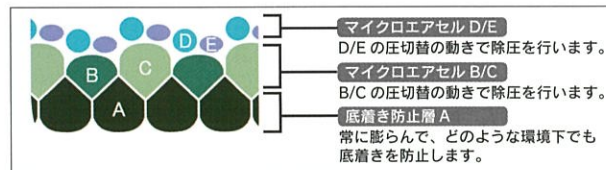

■ダブル圧切替



■ポンプと操作パネル

■レギュラー/191cm

■厚さ/18cm・13cm

品番	幅	TAISコード
MGRA91	91cm	00054-000347
MGRA83	83cm	00054-000345

ご利用者負担額 900単位/月

レンタル料金 9,000円/月

床ずれ防止用具



床ずれ防止用具


エバープラウド（ドライタイプ）

パラマウントベッド

Ever Proud

静止型で最高クラスの体圧分散性とずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス。

床ずれ防止用具

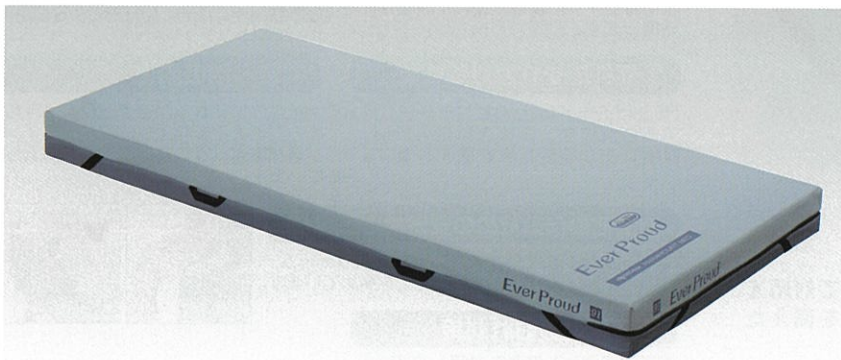

静止型マットレス最高レベル

体圧分散性

独自生地「グライドシート」による

ずれ防止

新素材「さらフェース」による


蒸れ軽減

独自の生地「グライドシート」が背あげ時にかかるずれ力を軽減

マットレスのクッション材を、独自に開発した「グライドシート」で包むことで、カバーとクッション材とを滑りやすくしています。背あげ時には、カバーを滑らせることで背部や踵部に生ずるずれ力を軽減します。逆に臀部は滑りにくい構造とし、臀部をしっかり支えて骨盤を起こしやすくすることで、姿勢のくずれを抑えます。

体圧分散


ずれ軽減

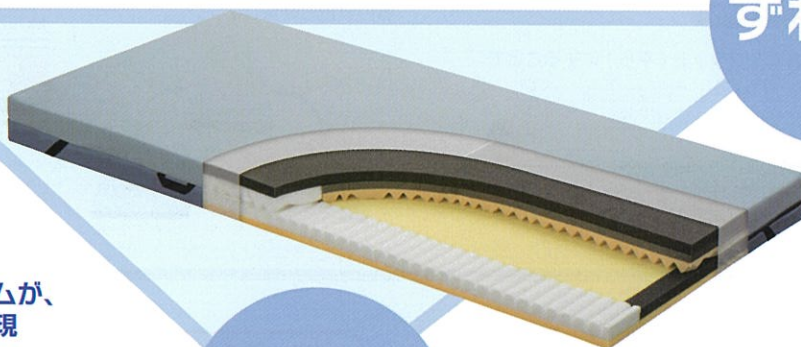

5層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現

弾力性の異なるウレタンフォームを5層に組み合わせ、エクストラソフト面では静止型マットレス最高レベルの体圧分散性を発揮します。反対側のソフト面は、反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立しています。利用者様のADLなどの床ずれリスクに応じて、使い分けることが出来ます。エクストラソフト面の最上層は非常にやわらかく、体圧分散性の高さに加えて身体への当たりが心地よく感じられるように配慮しています。

蒸れ軽減

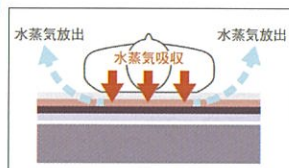

新素材「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と、快適な就寝環境をサポート

新素材「さらフェース」が水分の浸入を防ぎながら、身体とマットレスの間に発生する水蒸気（蒸れ）をカバー表面で吸収します。吸収した水蒸気は、身体が接触していない部分から放出します。蒸れを軽減することで、床ずれ要因の1つの皮膚潤滑にも配慮、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポートします。

利用者様の安全性・快適性に配慮した機能

- 背あげ・膝あげへの追従性を向上させるカーブフィットライン
- 端座位姿勢を安定させやすいサイドエッジ
- 背あげ時にマットレス自体のずり落ちを軽減するストッパー
- シーツを簡単に固定できるシーツストッパー



MRSA 抗菌加工



消臭加工 (エクストラソフト面)



難燃加工



耐薬品性カバー



吸放湿性カバー

■レギュラー／191cm ■厚さ／13cm ■ショート／180cm ■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード	品番	幅	TAISコード
KE-621UQ	91cm	00170-000966	KE-622UQ	91cm	00170-000967
KE-623UQ	83cm	00170-000968	KE-624UQ	83cm	00170-000969

ご利用者負担額 500単位/月

レンタル料金 5,000円/月

アルファプラ L

タイカ



高弾力で動きやすい

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを、下層に硬めの高弾性無膜ウレタンフォームを使用しています。三層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



底付き防止と安全性を確保するアルファゲル



中層のマットレスの腰部にアルファゲルが入っています。背あげ時、アルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。

身体を洗み込ませて体圧分散

「アルファプラ L」は上層と中層に高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、さらにアルファゲルを組み合わせることで、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。

快適性を伴う無膜ウレタンフォーム

熱がこもりにくくさわやか

新開発の無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減します。従来のウレタンフォームマットレスに比べ、熱の放散性能が30%以上向上しました（撥水・防水カバータイプでの比較）。

丸洗いできて、乾燥も早い

無膜ウレタンフォームは水抜けもよく、マットレス専用の洗浄乾燥工程において、乾燥時間が従来品に比べ1/9に短縮されました。軽量なので干すのもラクです。

撥水・防水カバータイプ

■レギュラー／195cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MB-LW1R	91cm	00563-000103
MB-LW3R	83cm	00563-000101

■ショート／181cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MB-LW1S	91cm	00563-000104
MB-LW3S	83cm	00563-000102

ご利用者負担額 500単位/月

レンタル料金 5,000円/月

通気カバータイプ

■レギュラー／195cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MB-LA1R	91cm	00563-000093
MB-LA3R	83cm	00563-000091

■ショート／181cm ■厚さ／10cm

品番	幅	TAISコード
MB-LA1S	91cm	00563-000094
MB-LA3S	83cm	00563-000092

ご利用者負担額 500単位/月

レンタル料金 5,000円/月


フィール

●利用者様それぞれに適した体圧分散性能と優しい触感の寝心地を提供します。

モルテン



ハイブリッド構造

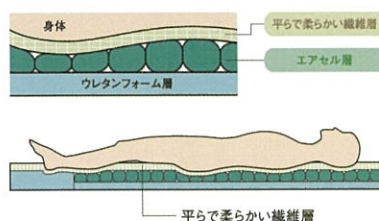

■レギュラー／193cm ■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード
MFEL91	91cm	00054-000159
MFEL83	83cm	

■ショート／182cm ■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード
MFEL91S	91cm	00054-000159
MFEL83S	83cm	

耐圧分散性能 すれ力対策 寝心地 座位安定性 安全・衛生対策

ご利用者負担額 500単位/月

レンタル料金 5,000円/月

フィールは体圧分散式マットレスに求められる5つの特性を備えています。

- エアセル層が、利用者様の体重や体型に合わせて最適な圧に自動調節し、体重が軽くても重くても一定の体圧分散性能を確保することができます。
- 安定した体圧分散性能が確保できるため、疼痛の人にも安心してお使いいただけます。
- 平らで柔らかい繊維層は、布団のような優しい触感で寝心地を高めており、腰痛やリウマチなどで痛みに敏感な人にも安心してお使いいただけます。ふわふわ感がなく寝返りもしやすくなっています。




床ずれ防止用具

床ずれ防止用具


アクアフロート（通気タイプ）

●背をあげたときの臀部の体圧分散に優れたマットレス

パラマウントベッド

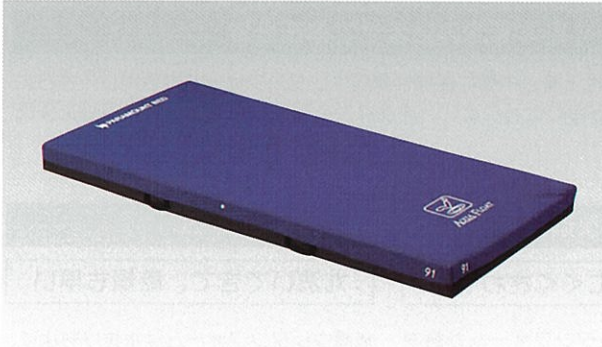

●体圧分散性能の秘密は、マットレス中央部（臀部）に埋め込まれたアクアセル。アクアセルが、背をあげたときの臀部をやさしく包み込み、優れた体圧分散性能を発揮します。

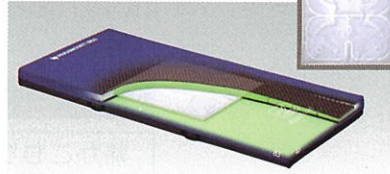

■レギュラー／191cm ■厚さ／12cm		
品番	幅	TAISコード
KE-841Q	91cm	00170-000507
KE-843Q	83cm	00170-000508

■ミニ／180cm ■厚さ／12cm		
品番	幅	TAISコード
KE-8411Q	91cm	00170-000511
KE-8431Q	83cm	00170-000512

ご利用者負担額 400単位/月

レンタル料金 4,000円/月


●通気性に優れ、洗浄できるニットカバータイプ

- 中央部に「アクアセル」を埋め込んだ構造
- 上半身・臀部・かかとの各部位に適した構造
- 12cm厚さで優れた体圧分散性能を実現
- 端座位が安定しやすい固めのサイドエッジ
- 側地（トップ）には伸縮性に優れた生地を使用
- 持ち運びのしやすいハンドル付き

ディンプルマットレス

ケープ

●ディンプル形状により、静止型ながら、かかとや骨突出部位の局所圧を部分解放できるマットレス。

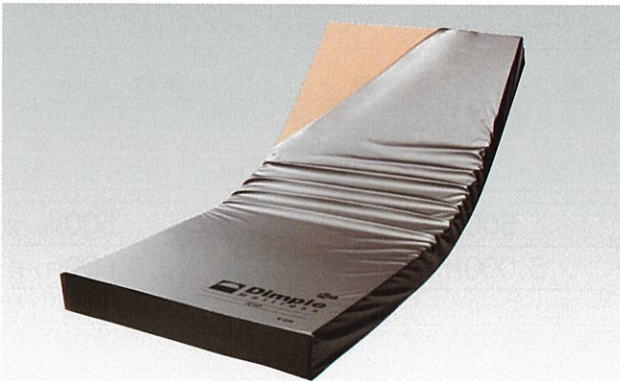

体重バランスに合わせた体圧分散と寝姿勢を保持



●身体の部位に合わせてディンプルの深さを調整。背骨のSラインを保持し理想的な寝姿勢を実現します。

■レギュラー／191cm ■厚さ／12cm

品番	幅	TAISコード
CR-541	90cm	00206-000070
CR-540	83cm	

■ショート／180cm ■厚さ／12cm

品番	幅	TAISコード
CR-543	90cm	00206-000070
CR-542	83cm	

骨突出部位に対応

●ディンプル形状が変形し、圧の部分解放



寝返りしやすい安定感

●表面は広い接触面積で身体を支え、高い安定感を実現



端座位がとりやすい

両端の高硬度アクティフフレーム構造により、安定した端座位を取れます



背上げ時の底つき・ずれに対応

ディンプル形状が背上げ時の圧迫感やずれを軽減。3層構造が底つきを防止



ご利用者負担額 400単位/月

レンタル料金 4,000円/月

体位変換器



スモールチェンジ ラグーナ/ラグーナプラス

床ずれ発生リスク度/軽度～重度

ケーブル

SMALL CHANGE

LAGUNA

自動で小さな体位変換を頻回に行う



スモールチェンジ機能

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」により快適な眠りを実現し、時間を問わずサポートを求められる介護者の負担を軽減します。



プロモーションビデオ
をご覧ください



●体重設定 :20kg ~ 120kg




●体重設定 :20kg ~ 120kg

体位変換器

スモールチェンジ機能

- 骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を約15分間隔で行うシステムです

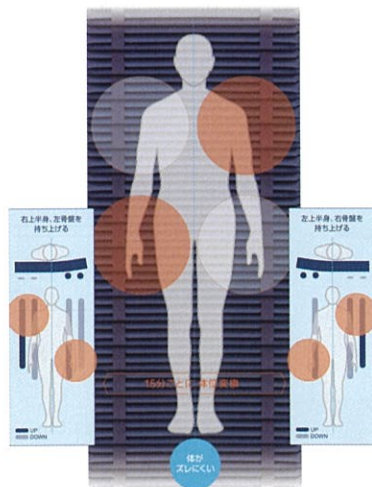

自動ヘッドアップ対応機能

- ベッドの背上げ角度に連動し最適なマット内圧に自動調整
- 圧迫感の少ない背上げ姿勢底づきを防止
- 背上げ角度が30°を超えるとスモールチェンジが自動オフ



使いやすい操作パネル

- クイックハードモード搭載
- かんたんモード(40～60kg)



停電対策機能

- 停電時マット全体の内圧を約14日間保持
- 電気復旧後は元の設定値が自動復帰するメモリ機能付き

メモリ 機能

停電対策機能付き

安全

<スモールチェンジ ラグーナ>

- レギュラー/192cm
- 厚さ/13.5cm

- ショート/180cm
- 厚さ/13.5cm

品番	幅	TAISコード	品番	幅	TAISコード
CR-703	90cm	00206-000103	CR-707	90cm	00206-000105
CR-700	84cm	00206-000102	CR-705	84cm	00206-000104

ご利用者負担額 850単位/月

レンタル料金 8,500円/月 非課税

<スモールチェンジ ラグーナプラス>

- レギュラー/192cm
- 厚さ/13.5cm (足元のみ厚さ14.5cm)

- ショート/180cm
- 厚さ/13.5cm (足元のみ厚さ14.5cm)

品番	幅	TAISコード	品番	幅	TAISコード
CR-723	90cm	00206-000108	CR-727	90cm	00206-000110
CR-721	84cm	00206-000107	CR-725	84cm	00206-000109

ご利用者負担額 850単位/月


レンタル料金 8,500円/月 非課税

体位変換器

体位変換器

セロリ

モルテン

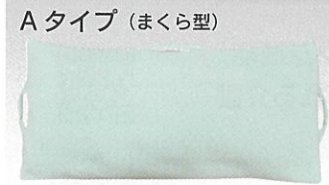

品番	TAISコード
MTYA	00054-000112

ご利用者負担額 100単位/月

レンタル料金 1,000円/月

Aタイプ (まくら型)

- サイズ/幅68×奥行32
- 材質/クッションビーズ/オレフィン系エラストマー
アウターカバー/綿+ポリエステル
インナーカバー/ポリエステル
- 重量/約2.4kg



- サイズ/幅141×奥行23
- 材質/クッションビーズ/オレフィン系エラストマー
アウターカバー/綿+ポリエステル
インナーカバー/ポリエステル
- 重量/約3.1kg

品番	TAISコード
MTYB	00054-000113

ご利用者負担額 100単位/月

レンタル料金 1,000円/月

トレイジースライドシート

東レ



- サイズ/シート: 120×75cm
収納袋: 19.5×29cm
- 材質/シート生地: ナイロン100%
(制菌加工 マックスベック®使用)
収納袋: ポリエステル100%
- 重量/シート: 約124g
収納袋: 約40g

3層構造による
抜群のスライド性。
360°自在に移動、
体位変換も。

品番	TAISコード
TES-100	00947-000001

ご利用者負担額 100単位/月

レンタル料金 1,000円/月

テイコブ移乗用介助ベルト

幸和製作所

移乗介助をしっかりアシストします



品番	TAISコード
AB31	00030-000142

ご利用者負担額

レンタル料金



用途に合わせた
縦横の持ち手

- サイズ/幅12×長さ135cm
- 適応胸囲/約60~130cm
- 材質/本体:(外側)ナイロン
(内側)ポリエステル/塩化ビニール
持ち手:ポリプロピレン/ポリウレタン
バックル:POM ポケット:PVC

ウェルピー HC



ウェルピーHC

ホームケア

フィッティングしやすさと
耐久性を高めました

ハーディーケア

やさしく体位変換できます

ハイケア

体重を広く分散できます

体圧分散性能をアップ

四肢拘縮、円背の方の場合 被験者: 男性 168cm 70kg

●マットレスのみ
接触面積が小さい/腰・かかとに体重が集中している

●マットレス+ポジショニング
接触面積が大きくなる

従来のマットレスでは、腰とかかとに体重が集中し、接触面積が小さいため、体圧分散が不足しています。一方、ウェルピーHCは、独自の形状により、体重を広く分散し、接触面積を大きくすることで、体圧分散性能を向上させます。

ポジショニングに、優しさと快適さところちよさを。
使う人と介助する人への想いを込めて生まれたクッションです。

タイカ



- ジャンボ
- 幅73×長73cm ■重量2.4kg

品番	TAISコード
PC-HC-J1	00563-000073

ご利用者負担額

レンタル料金



- ピロー
- 幅30×長80cm ■重量0.8kg

品番	TAISコード
PC-HC-P1	00563-000080

ご利用者負担額

レンタル料金



- ウェーブ
- 幅75×長65cm ■重量1.1kg

品番	TAISコード
PC-HC-W1	00563-000076

ご利用者負担額

レンタル料金



- ウェーブ(ロング)
- 幅75×長80cm ■重量1.5kg

品番	TAISコード
PC-HC-W2	00563-000081

ご利用者負担額

レンタル料金



- ブーメラン (大)
- 幅50×長90cm ■重量1.3kg

品番	TAISコード
PC-HC-B1	00563-000074

ご利用者負担額

レンタル料金



- ブーメラン (小)
- 幅44×長74cm ■重量0.8kg

品番	TAISコード
PC-HC-B2	00563-000075

ご利用者負担額

レンタル料金

■材質/中身: ウレタンフォーム・ナイロン 生地: ポリエステル100%